

SAFEGUARD® 12cm


TÉCNICA PREVIA Y POSTERIOR A LA HEMOSTASIA

CARDIOVASCULAR



¡Deje que SAFEGUARD haga el trabajo por usted!

SAFEGUARD es un dispositivo versátil de gestión del acceso a la zona de la herida que le ayuda a conseguir y mantener la hemostasia. SAFEGUARD simplifica la gestión del acceso a la zona de la herida antes y después de la hemostasia. Disminuye la carga del personal y permite aprovechar al máximo los recursos valiosos a la vez que aumenta la comodidad del paciente.

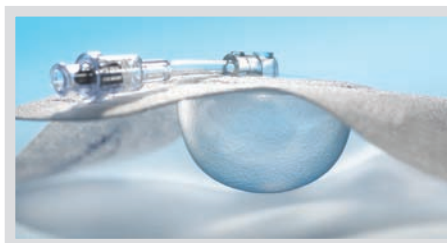

Volumen máximo de aire: 7ml

¿POR QUÉ USAR SAFEGUARD 12cm?

SAFEGUARD 12cm ofrece una mayor comodidad para el paciente

- No restringe el movimiento del paciente
- Elimina la necesidad de usar incómodas bandas o tiras

SAFEGUARD 12cm es fácil de usar y de aplicar

- Cumple el protocolo hospitalario habitual
- Cuatro pasos sencillos

SAFEGUARD 12cm permite aplicar presión sin necesidad de usar las manos

- Protege la zona y mantiene una presión uniforme
- Es versátil y puede utilizarse como vendaje de compresión para proteger la zona


SAFEGUARD para mantener la hemostasia

- La ventana transparente de SAFEGUARD permite al personal acceder fácilmente a la zona sin necesidad de retirar el dispositivo
- Ideal para heridas con supuración


Guía de consulta sobre presión de SAFEGUARD 12cm¹

ml de aire	Fuerza media	Fuerza máxima	Fuerza mínima
0	0,72 lb	1,22 lb	0,11 lb
3	2,07 lb	2,77 lb	1,33 lb
5	4,44 lb	5,43 lb	3,55 lb
7	9,05 lb	10,32 lb	7,87 lb

TÉCNICA DE APLICACIÓN

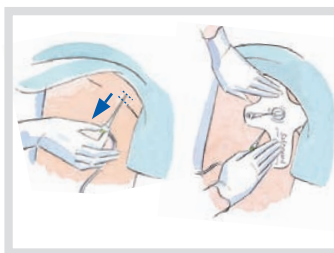

1. Aplicación

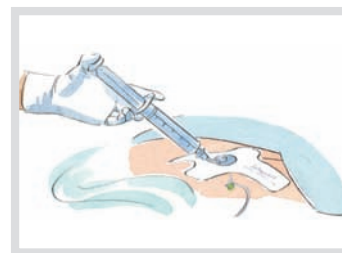

2. Inflado



3. Compresión



4. Desinflado

Información sobre pedidos: +1 800 777 4222

Descripción	Nº de referencia
SAFEGUARD 12cm (10 por caja)	82050

¹ Se incluyeron 10 unidades en cada conjunto de muestras. Estas mediciones se realizaron sobre una placa de metal, por lo que los resultados en humanos pueden variar. La piel y el tono muscular pueden afectar a la fuerza aplicada.

