

SAFEGUARD® 24cm
TÉCNICA DE ASISTENCIA MANUAL,
PREVIA Y POSTERIOR A LA HEMOSTASIA

CARDIOVASCULAR



SAFEGUARD es presión, y la presión funciona

Permita que SAFEGUARD le ayude a conseguir y mantener la hemostasia. El estudio clínico sobre la “Técnica de asistencia manual SAFEGUARD” (SMAT) demostró que SAFEGUARD 24cm reduce de forma segura y eficaz el tiempo de compresión activa en una canulación de la arteria femoral tras los procedimientos de diagnóstico e intervención.

SAFEGUARD simplifica la gestión del acceso a la zona de la herida antes y después de la hemostasia. Disminuye la carga del personal y permite aprovechar al máximo los recursos valiosos a la vez que aumenta la comodidad del paciente.

Reduce el tiempo de compresión activa¹

	Diagnóstico	Intervención
Tiempo de compresión activa (minutos)	5	10
Tiempo de compresión pasiva (minutos)	120	240
Tiempo de compresión total (minutos)	125	250

¿POR QUÉ USAR SAFEGUARD 24cm?

SAFEGUARD ofrece una presión mecánica sin necesidad de usar las manos

- Reduce el tiempo de compresión activa
- Mantiene la presión durante el traslado del paciente sin necesidad de equipo ni personal auxiliares
- Ofrece una presión constante sobre la zona sin que sea necesario aplicar presión manualmente, que puede variar en función de la persona que la ejerza

SAFEGUARD es fácil de usar y de aplicar

- Olvídense de complicadas ecuaciones o equipos que gestionar
- Solamente necesita una persona para la aplicación y una jeringa con cierre luer estándar
- Cuatro pasos sencillos


SAFEGUARD para mantener la hemostasia

- Ideal para pacientes que no son aptos para el tratamiento
- La ventana transparente de SAFEGUARD le permite al personal acceder fácilmente a la zona sin necesidad de retirar el dispositivo
- Una vez lograda la hemostasia, puede utilizarse SAFEGUARD para la supuración y tras la retirada de un BIA

Guía de referencia sobre presión de SAFEGUARD 24cm²

ml de aire	Fuerza media	Fuerza máxima	Fuerza mínima
0	0,12 lb	0,24 lb	0,09 lb
20	4,89 lb	6,93 lb	0,74 lb
30	11,59 lb	14,85 lb	8,83 lb
40	18,74 lb	22,55 lb	15,20 lb

TÉCNICA DE APLICACIÓN

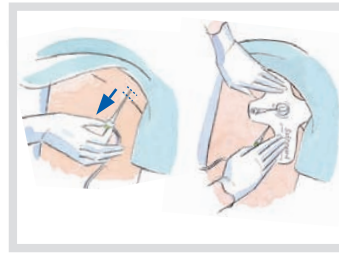

1. Aplicación



2. Inflado



3. Compresión



4. Desinflado

Información sobre pedidos: +1 800 777 4222

Descripción	Nº de referencia (EE.UU.)	Nº de referencia (Internacional)
SAFEGUARD 24cm (10 por caja)	82000D	82000

¹ Datos de archivo; Estudio multicéntrico sobre la técnica de asistencia manual SAFEGUARD.

² Se incluyeron 10 unidades en cada conjunto de muestras. Estas mediciones se realizaron sobre una placa de metal, por lo que los resultados en humanos pueden variar. La piel y el tono muscular pueden afectar a la fuerza aplicada.

