

LINEAR® 7,5Fr. CATETERE IAB

CARDIOVASCULAR



DATASCOPE HA CAMBIATO NOME IN MAQUET CARDIOVASCULAR



I professionisti del settore cardiaco si sono sempre affidati ai prodotti Gold Standard Cardiac Assist di Datascope. Adesso che Datascope appartiene a MAQUET Cardiovascular, siamo in una posizione migliore per fare avanzare le tecnologie per la cura del paziente e mantenere un livello eccezionale di supporto clinico e servizio di qualità.

MAQUET offre un'ampia gamma di soluzioni cliniche convenienti ed innovative per la terapia di contropulsazione, come la nostra linea di cateteri da contropulsazione aortica LINEAR 7,5Fr. Non ci siamo accontentati di realizzare un catetere di inserimento più piccolo, ma abbiamo voluto

migliorarne le prestazioni superando la concorrenza e le nostre precedenti linee di prodotti.

MAQUET ha creato la membrana Durathane, in grado di resistere anche ai pazienti più difficili. Sebbene sia dotata di minore spessore, è più resistente e durevole di qualsiasi altra membrana per catetere IAB in commercio. Il materiale in poliuretano sagomato brevettato di Durathane è stato sviluppato per supportare persino la costante abrasione delle aorte più calcificate. Lo spessore sottile, tuttavia, consente di produrre cateteri molto meno invasivi.


MAQUET – Lo Standard Gold.

IL NUOVO CATETERE LINEAR 7,5Fr. PIÙ FACILE DA INSERIRE*

La membrana premium durathane fornisce prestazioni migliori*


- Una resistenza all'abrasione superiore del 43%
- Una maggiore resistenza contro i guasti da fatica
- Un gonfiaggio immediato all'avvio
- Forza di inserimento ridotta

UNA RESISTENZA* ALL'ABRASIONE IN VARIE MEMBRANE

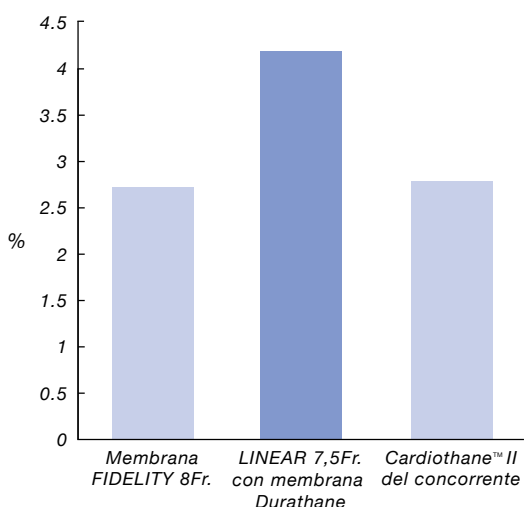

I cateteri iab linear hanno dimostrato una riduzione del 50% delle perdite nella membrana del palloncino*, i dati si basano su 5 anni di vendite in raffronto alle perdite registrate per la membrana FIDELITY 8Fr.



PERDITE DA FATICA E ABRASIONE

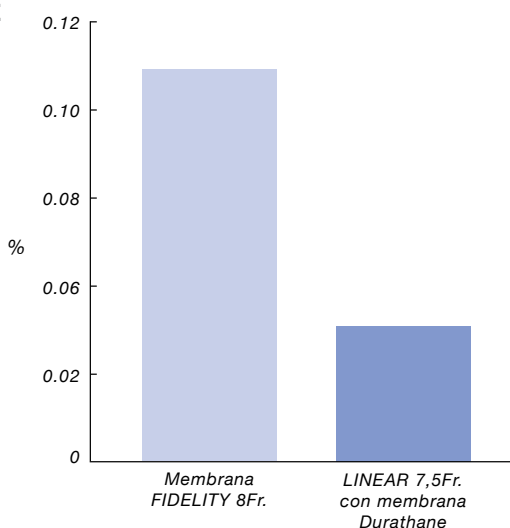

La minore misura del 7,5Fr. È ideale per adulti di ridotte dimensioni fisiche, diabetici e pazienti con malattia vascolare periferica*

- Riduzione dell'area di sezione circolare del catetere del 12% rispetto alla versione 8Fr.
- La minore dimensione del catetere permette un maggiore flusso dell'arto distale
- Riduce le dimensioni del punto di accesso all'arteria
- Facilita l'inserimento in lumi di vasi ridotti o malati
- Il catetere IAB ha una riduzione della forza di inserimento del 43% rispetto al catetere da contropulsazione 7,5Fr. della concorrenza

FORZA DI INSERIMENTO RIDOTTA DEL 43%

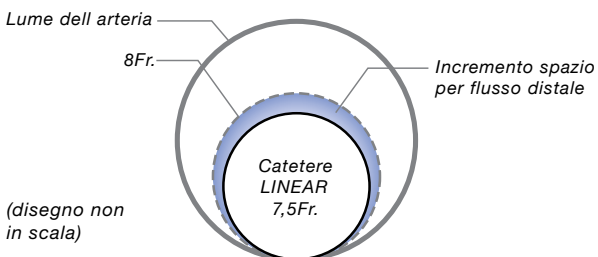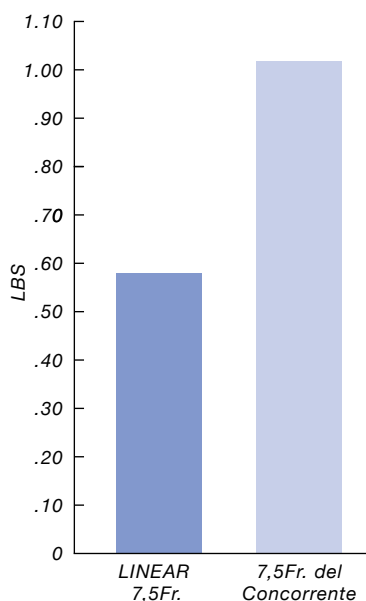


NON CI BASTAVA RIDURNE LE DIMENSIONI VOLEVAMO AUMENTARNE LA QUALITÀ

Un profilo ridotto senza compromessi delle prestazioni*



- La membrana LINEAR 7,5Fr. si gonfierà/sgonfierà ad una velocità paragonabile a quella del nostrocateretere da contropulsazione FIDELITY 8Fr.
- Il trasporto gas più veloce permette un migliore supporto per frequenze cardiache alte e le aritmie
- Il test di flessione a 80° LINEAR ha dato come risultato un ciclo più veloce del 19% rispetto ai cateteri IAB della concorrenza

LINEAR 7,5Fr. PRESTAZIONI PIÙ VELOCI NEI CICLI GONFIAGGIO/SGONFIAGGIO/

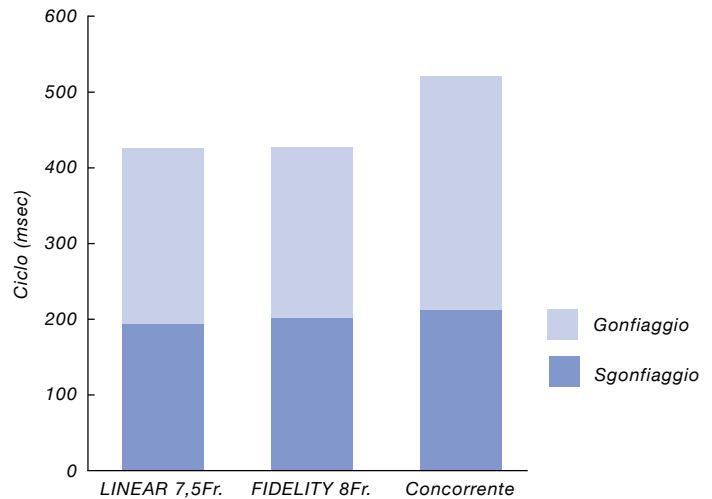


Introduttore migliorato

- Introduttore migliorato per il passaggio della cannula
- Valvola emostatica
- Raccordo con blocco girevole dell'introduttore
- Codifica colore universale per misure
- Introduttore guida rinforzato

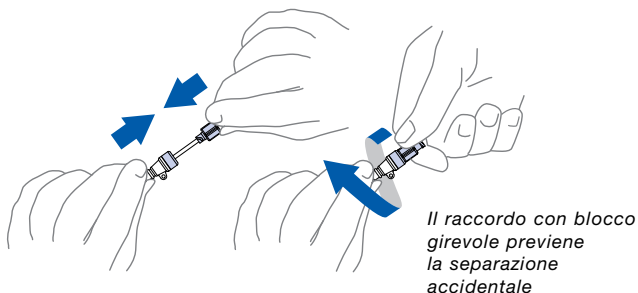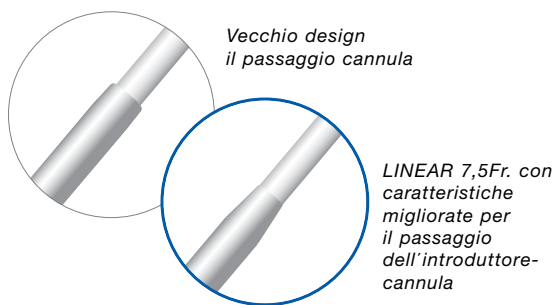

Protezione con impugnatura a T per membrana del palloncino

- Mantiene la membrana rivestita ermeticamente prima dell'inserimento
- Aiuta a gestire il catetere prima dell'inserimento

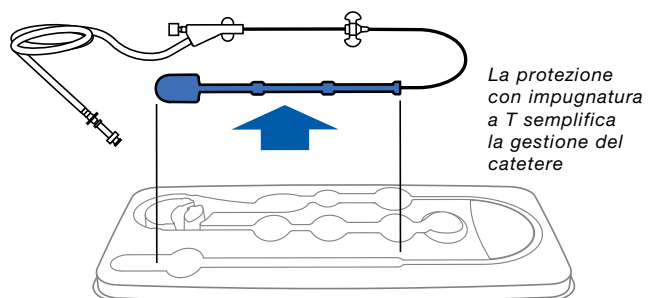



SPECIFICHE TECNICHE:*

LINEAR 7,5Fr. CATETERE DA CONTROPULSAZIONE AORTICA CON KIT DI INSERIMENTO

Numero articolo	PALLONCINO			Lunghezza inseribile (mm)	Dimensione ID lume di pressione (pollici)	Dimensioni (pollici) filo guida
	Volume (cc) nominale	Lunghezza (mm) nominale	Diametro palloncino a 2 psi (mm)			
0684-00-0480-01	40	258	15,0	723	0,027	0,025
0684-00-0479-01	34	219	15,0	723	0,027	0,025
0684-00-0478-01	25	173	15,0	723	0,027	0,025

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Descrizione	Numero articolo
LINEAR 7,5Fr. da 40cc Catetere IAB con prolunga	0684-00-0480-01
LINEAR 7,5Fr. da 40cc Catetere IAB con contropulsatore Arrow	0684-00-0480-02
LINEAR 7,5Fr. da 34cc Catetere IAB con prolunga	0684-00-0479-01
LINEAR 7,5Fr. da 34cc Catetere IAB con contropulsatore Arrow	0684-00-0479-02
LINEAR 7,5Fr. da 25cc Catetere IAB con prolunga	0684-00-0478-01
LINEAR 7,5Fr. da 25cc Catetere IAB con contropulsatore Arrow	0684-00-0478-02
Kit inserimento da 40cc e 34cc include: Introduttore rinforzato da 6" (15cm) con dilatatore Un (1) ago angiografico calibro 18, Un dilatatore con rientro Un filo guida in acciaio inossidabile J PTFE da 0,025" x 145cm 3mm Una (1) prolunga per catetere da 6 ft. (solo da 40cc e 34cc) Un cappuccio maschio luer lock Rubinetto a 3 vie Due lunghezze di tubo per pressione da 4ft (122cm)	0884-00-0019-13
Il kit inserimento da 25cc include: Il contenuto sopradescritto e una prolunga per catetere da 5 ft.	0884-00-0019-12
Un filo guida in acciaio inossidabile J PTFE 0,025" x 145cm da 3mm (scatola di 5 pezzi)	0684-00-0254-09
Un filo guida in acciaio inossidabile J PTFE 0,025" x 175cm da 3mm (scatola di 5 pezzi)	0684-00-0254-14
Un filo guida in acciaio inossidabile J PTFE 0,025" x 260cm da 3mm (scatola di 5 pezzi)	0684-00-0254-15
Contropulsatore Arrow 5PK (da 25cc a 40cc)	0684-00-0510-01
7,5Fr. Set introduttore e dilatatore	0684-00-0403-05
Prolunga catetere per soli cateteri da 40cc e 34cc (scatola di 5 pezzi)	0684-00-0186
Prolunga catetere solo per 25cc (ciascuno)	0684-00-0325

CONFIGURAZIONE

Materiali: Tutti i materiali del catetere e del palloncino soddisfano le linee guida per la biocompatibilità ISO e FDA dei dispositivi e dei materiali. LINEAR 7,5Fr. I kit di inserimento ed i cateteri IAB da 50 ml non contengono lattice.

Confezione: Sacchetto singolo, rivestimento angolare

Ciclo di vita: 1 procedura

Durata di vita: 3 anni dalla data di sterilizzazione

Tutti i parametri sono stati rilevati ad una temperatura ambiente di 25°. Maquet adotta una politica di sviluppo continuo dei prodotti e si riserva il diritto di modificare materiali e specifiche senza preavviso.

MAQUET

GETINGE GROUP

Datascope Corp.

15 Law Drive

Fairfield, NJ 07004, Stati Uniti

Telefono: +1 800 777 4222 oppure
+1 973 244 6100

Fax: +1 800 258 8762 oppure
+1 973 244 6279

www.datascope.com

www.maquet.com

GETINGE GROUP è un fornitore leader in tutto il mondo di attrezzature e sistemi che contribuiscono al miglioramento della qualità ed all'efficienza dei costi nelle scienze sanitarie e nelle bioscienze. Siamo presenti con i tre marchi ArjoHuntleigh, GETINGE e MAQUET. ArjoHuntleigh è centrata sulla manipolazione del paziente e sull'igiene, la disinfezione, la profilassi TVP, i letti ospedalieri, le superfici terapeutiche e la diagnostica. GETINGE offre soluzioni per il controllo e la prevenzione delle infezioni nelle scienze sanitarie e nelle bioscienze. MAQUET è specializzata in applicazioni, prodotti e soluzioni terapeutiche, e nei servizi per sale operatorie e reparti di terapia intensiva.